




# 定量噴霧液使用方法

A.

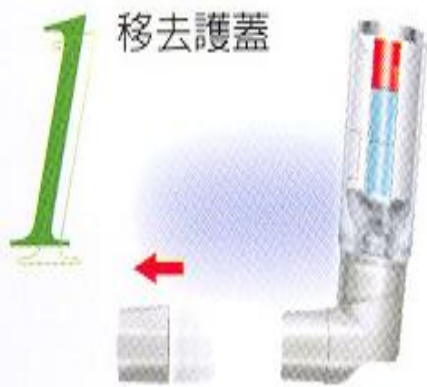

參考資料來源：百靈佳殷格翰股份有限公司定量噴霧液仿單

## B. Aero chamber (用於吸氣與憋氣不協調個案)



1. 查看輔助器之藥腔內有沒有阻礙物。

2. 將定量噴霧劑的護蓋取下。



3. 將噴霧劑上下用力搖 10 下，使藥物得以充分搖勻，再將定量噴霧劑插入輔助器背後。

4. 將面罩放在臉上。



5. 按壓藥罐後，自然呼吸 5-6 次 (約罩住口、鼻 20-30 秒)，勿太急太快，期間須將面罩壓緊面部，勿漏氣。

#### D. 注意事項：

- (1) 每次使用前，務必充分振搖。
- (2) 噴藥時，容器底部應朝上(倒立)。
- (3) 以冷開水或溫開水清洗吸入輔助器，甩一甩後自然風乾。
- (4) 即使用完的空瓶也不可戳破、燃燒。
- (5) 過期或用完的空瓶，請丟棄於兒童檢不到的地方。
- (6) 遠離火源及日光直射處；勿冷凍儲存；也不要放車上以免過熱。
- (7) 每次操作步驟，吸入一個定劑量。
- (8) 若含類固醇時，使用後須漱口。
- (9) 若需吸兩次藥時，必須間隔 30 秒-1 分鐘。

#### \* 清洗方法



1. 將輔助器後面的橡膠拔開
2. 輔助器放進清水盆中浸泡 15 分鐘，將它輕輕搖動甩水洗淨
3. 將多餘的水抖出，請勿擦拭內部，垂直擺放，讓其自然晾乾

參考資料來源：銓鼎有限公司愛治喘吸藥輔助器使用說明書

【本衛教單僅供衛教宣導用，圖文內容若有侵犯著作權，請惠予告知本院】